

Salivette® Speichelgewinnung

Gebrauchsanweisung für Patienten

- Entnehmen sie nach Anweisung des Arztes eine einzelne Probe oder mehrere Proben (das Set enthält standardmässig 3 Probenröhrchen)
- Führen Sie die Speichelgewinnung zu den Zeitpunkten durch, die von Ihrem Arzt verordnet worden sind
- Für ein Standard-Tagesprofil entnehmen Sie bitte 3 Proben jeweils um: 8.00 h / 16.00 h / 23.00 h
- Sollten Sie keine besonderen Hinweise erhalten haben, so ist es zweckmässig, die Probenentnahme morgens vor dem Zähneputzen vorzunehmen
- Soll die Speichelgewinnung im Laufe des Tages erfolgen, so darf sie frühestens 30 Minuten nach der Aufnahme fester und flüssiger Nahrung durchgeführt werden.




- 1** Halten Sie die Salivette® am Rand des eingehängten Gefässes fest, und entfernen Sie den Stopfen.

Das Abnehmen des Stopfens wird erleichtert, wenn man ihn beim Öffnen des eingehängten Gefässes ein wenig zur Seite abknickt.




- 2** Entnehmen Sie die Watterolle der Salivette®.

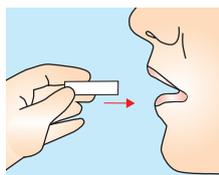

- 3** Führen Sie jetzt die Speichelsammlung nach den Anweisungen des Arztes durch. Sollten Sie keine Hinweise erhalten haben, so kauen Sie leicht für 1 Minute die Watterolle. Behalten Sie die Watterolle in jedem Fall so lange im Mund, bis Sie das Gefühl haben, dass Sie den gesammelten Speichel nicht mehr im Mund halten können.



- 4** Geben Sie die eingespeichelte Watterolle nun wieder in das Einhänggefäss zurück und verschliessen Sie die Salivette® fest mit dem Stopfen.

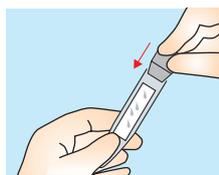

- 5** Füllen Sie das Etikett auf dem Gefäss vollständig aus. Geben Sie dabei unbedingt auch den Entnahmezeitpunkt an.

Die benutzte und fest verschlossene Salivette® können Sie nun an Ihren Arzt zurückgeben. Ist es nicht möglich, die Salivette® sofort abzugeben, oder ist es notwendig, mehrere Speichelproben zu sammeln, dann sollten Sie die Salivette® im Kühlschrank aufbewahren.

Wichtiger Hinweis: Das Produkt darf nicht bei Kindern unter 3 Jahren sowie bei Patienten mit erhöhter Verschluckungsgefahr angewendet werden.